

## Waterpik®Sensonic® Профессиональная зубная щетка

### Чистка зубов при помощи звуковой щетки

1. Наденьте насадку на держатель. Надавите на щетку до щелчка.
2. Поместите щетку в ротовую полость, затем включите.
3. Выберите низкую или высокую скорость чистки путем надавливания кнопки «вкл».


Для низкой скорости нажмите кнопку один раз, для высокой – два раза. Низкая скорость используется для мягкой чистки и массажа десен, высокая – для эффективного снятия налета.

Для достижения наилучших результатов, разместите щетку вдоль линии десны под углом 45°.



Для оптимизации чистки с помощью звуковой щетки, применяйте меньше давления, чем при чистке ручной зубной щеткой.

Медленно передвигайте щетку в полости рта. Многие стоматологи рекомендуют тратить на каждый участок около 30 секунд.

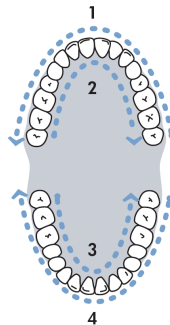

Щетка снабжена специальным таймером, который каждые 30 сек. издает легкий щелчок, напоминающий, что следует поменять положение щетки.

### **Использование межзубной щетки**

Наденьте насадку на держатель. Надавите на щетку до щелчка. Щетку можно использовать как с зубной пастой, так и без нее. Разместите щетку перпендикулярно линии десен между двумя зубами.



Нажмите на кнопку «вкл.» и мягко следуйте по межзубному пространству.

После каждого использования выключите устройство, снимите щетку с держателя, и хорошо промойте ее водой.

Вытрите досуха.